

Rullstolsdynor och tillbehör

TRYCKFÖRDELANDE

Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
Se WebSesam	35–60 cm	6,5–7,5 cm	100 kg (bredd 35–37,5 cm) 125 kg (bredd 40–50 cm) 150 kg (bredd 52–60 cm)	BimaPlastteknik	MDR

Bima duo

Bas i formgjutet skum med olika densitet över sittytan som ger stabilitet och tryckfördelning. Kupad eller plan undersida. Omplan undersida behövs, kontakthjälpmedelskonsulent. Laminerat plyschöverdrag med ventilerade sidor och antiglid på överdragets undersida.



Tillbehör

Inkontinensöverdrag

Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
Se WebSesam	35–47 cm	6 cm under lår 6,5 cm undersittbensknölar 7,5 cm vid bendelaren	150 kg	Nima Care	MDR

Nima Ecoform Pluma

Anatomisk form med gjutet trög-/viscoskum i skumbasen. Fluidgel under sittbensknölar. Bendelare och lateralstöd. Kupad eller plan undersida. Luftigt överdrag i polyester. Förvaras liggande så att fluiddelen kan vandra från sida till sida.




Tillbehör

Inkontinensöverdrag

Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
Se WebSesam	30–52 cm	5 cm	125 kg (bredd 35–42 cm) 135 kg (bredd 45–47 cm) 150 kg (bredd 50–52 cm)	Care of Sweden	MDR

Curera Contur

Anatomisk formgjuten bas av skum med viscoelastiskt skum i sittgropen. Vätsketätt ytskikt. Överdrag av luftig polyesterplysch. Passar både plan och hängmattesits.

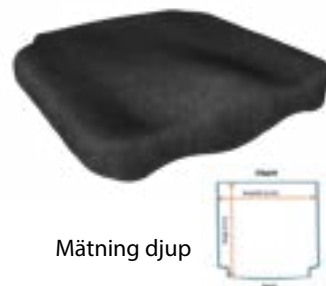

Mätning djup



information om alla hjälpmedelsområden hittar du på vår hemsida
www.regionvasterbotten.se/hjalpmedel

Rullstolsdynor och tillbehör

TRYCKAVLASTANDE

Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
Se WebSesam	30–60 cm	9,5 cm	100 kg för de mindre storlekarna och upp till 300 kg för de större.	AnatomicSitt	MDR

Varilite Evolution

Dyna i kombination med skum och luft utan separat pump. Har inbyggd ventil. Anpassningsbar kil medföljer. Luftigt överdrag.

Tillbehör

Inkontinensöverdrag



Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
Se WebSesam	35–47 cm	8 cm under lår	150 kg (bredd 35–45 cm) 200 kg (bredd 47 cm)	Nima Care	MDR

Nima Ecoform Pluma skikt

Anatomisk form med gjutet trög-/viscoskum i skumbasen. Fluidgel under sittbensknölna och ett toppskikt av mjukt kallskum. Kupad eller plan undersida. Luftigt överdrag i polyester. Förvaras liggande så att fluiddelen kan vandra från sida till sida.

Tillbehör

Inkontinensöverdrag



Bilden visar
plan undersida.

Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
Se WebSesam	35–55 cm	10 cm	125 kg (bredd 35–37,5 cm) 135 kg (bredd 42,5–47,5 cm) 150 kg (bredd 50–60 cm)	BimaPlastteknik	MDR

Bima fjäder

Formgjuten skumbas med bendelare och stabiliserande sarger. Fjäderkasett i sittgrop som fördelar trycket. Kan med fördel användas i eldriven rullstol eftersom den är något fjädrande. Plan undersida. Överdrag i stretchig velour. Inkontinenshätta medföljer.

Tillbehör

Inkontinensöverdrag



Artikelnummer	Bredd	Djup	Leverantör	Klassificering
Se WebSesam	40–50 cm	45/48–50/53 cm	BimaPlastteknik	MDR

Bima fjäder med urtag i sida och bakkant

I sortimentskatalogen heter den Plan el- eller komfortrullstol.

Variant med urtag för att passa tillrullstolar med utstickande ryggfäste. Plan undersida.

Tillbehör

Inkontinensöverdrag



Rullstolsdynor och tillbehör

Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
Se WebSesam	35–55 cm	9 cm	150 kg (upp till storlek 45x45 cm) 200 kg (storlek 45x45 cm och 50x45) 300 kg (över storlek 50x45 cm)	Nima Care	MDR

Nima 600 Visco

Bas i anatomiskt format skum med viscoelastiskt skum på toppen. Passar både plan- och hängmattesits. Luftigt överdrag.

Tillbehör

Inkontinensöverdrag



TRYCKAVLASTANDE OCH POSITIONERANDE

Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
Se WebSesam	35–55 cm	6 alternativt 10 cm	250 kg	Invacare	MDR

Vicair Academy Vector O2

Luftdyna med tryckavlastande egenskaper, positioneringsmöjligheter och hög stabilitet. Består av luftfyllda celler indelade i nio fack. Cellerna glider lätt mot varandra och formar sig efter kroppens kontur. Överdrag i luftgenomsläppligt tyg.

Tillbehör

Inkontinensöverdrag



Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
Se WebSesam	36,5–62,5 cm	10 cm	Obegränsad. Men dynans storlek måste anpassas efter användaren.	Permobil	MDR

Roho Quadtro Select

Luftdyna med ISOFLO-ventil som gör att luften kan låsas i fyra kammare för att skapa stabilitet och positioneringsmöjligheter. Luftigt överdrag. Pumpmedföljer.

Tillbehör

Inkontinensöverdrag



Övrigt

Se [Permobil's storleksguide](#)

Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
Se WebSesam	36–56 cm	8 cm	136 kg (bredd 36–51 cm) 227 kg (bredd 56 cm)	Invacare	MDR

Matrx Libra

Rullstolsdyna med tryckavlastande egenskaper och positioneringsmöjligheter. Formad bas av höglastiskt skum med silikonbaserad gelisittgrop. Överdrag i luftgenomsläppligt tyg, samt inre överdrag som delvis skyddar mot väta.

Tillbehör

Inkontinensöverdrag, kilar och extra gelinlägg



Rullstolsdynor och tillbehör

VÄRME- OCH FUKTAVLEDANDE MED HÖG LUFTGENOMSLÄPPLIGHET

Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
Se WebSesam	35–55 cm	5 cm	140 kg	Salubrious	MDR

Soof

Stabil och luftig med en dynbas av Soof-material (polyestertrådar). Utjämningsplatta för hängmattesits medföljer. Vändbar och roterbar vilket gör att samma storlek kan användas på flera sätt. Luftigt överdrag vars dragkedja är placerad bakåt eller på en av sidorna, beroende på hur dynan används. Finns för plan och hängmattesits. Utjämningsplatta medföljer för hängmattesits.



Tillbehör

Inkontinensöverdrag

Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
Se WebSesam	35–50 cm	6 eller 10 cm	250 kg	Invacare	MDR

Vicair Academy Adjuster O2

Luftdyna med tryckavlastande egenskaper, positioneringsmöjligheter och hög stabilitet. Består av luftfyllda celler indelade i fem fack. Cellerna har en yta med låg friktion som gör att de glider lätt mot varandra och formar sig efter kroppens kontur. Överdrag i luftgenomsläppligt tyg.



Tillbehör

Inkontinensöverdrag

Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
Se WebSesam	36–65 cm	5 cm under lår	130 kg	Rehabshop	MDR

Stimulite Slimline/Slimline XS

Stabil och luftig dyna som har perforerade celler med bikakestruktur och lätt konturerad överdel. Plan eller rund botten.

Finns i två varianter: Slimline och Slimline extra sensitive (XS) för extra känslig hy.

Tillbehör

Inkontinensunderlägg (Rekommenderat inkontinensskydd som läggs i överdraget på undersidan av dynan.)

Inkontinenshätta



alla produkter och artikelnummer finns i websesam.

Rullstolsdynor och tillbehör

HÖGRE ANVÄNDARVIKT, TRYCKFÖRDELANDE

Läs om [högre användarvikt på vår hemsida](#).

Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
Se WebSesam	53,5–61 cm	6 cm under lår	159 kg (bredd 53,5 cm) 181 kg (bredd 56–61 cm)	Permobil	MDR

Comfort Curve

Konturerat gjutetskum vilket fördelar belastningen och ger stabilitet.
Överdrag i luftig stretchtextil.

Tillbehör

Inkontinensöverdrag, placeras i standardöverdrag.



Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
Se WebSesam	53–60 cm	7 cm	150 kg	Nima Care	MDR

Nima Standard 600

Bas i formgjuten skum vilket fördelar belastningen och ger stabilitet.
Fasade kanter för att passa både plan- och hängmattesits. Luftigt överdrag.

Tillbehör

Inkontinensöverdrag



Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
Se WebSesam	50–60 cm	9,5 cm	200 kg	Salubrious	MDR

Stealth Tru-Comfort 2

Bas av formgjutet skum med utskuren sittgrop, stor bendelare och lårstöd.
Överdel av avlastande trögsaum. Luftigt överdrag.

Tillbehör

Inkontinensöverdrag, placeras i standardöverdrag.



information om alla hjälpmedelsområden hittar du på vår hemsida
www.regionvasterbotten.se/hjalpmedel

Rullstolsdynor och tillbehör

HÖGRE ANVÄNDARVIKT, TRYCKAVLASTANDE

Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
Se WebSesam	53–60 cm	8,5 cm centrum bakkant	250 kg	Nima Care	MDR

Nima 600 Visco

Toppskikt av 3,5 cm viscoelastiskt skum på formgjuten bas. Luftigt överdrag. Fasade kanter på dynans undersida för att passa både hängmattesits och plansits.

Tillbehör

Inkontinensöverdrag



Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
Se WebSesam	50–60 cm	9,5 cm	200 kg	Salubrious	MDR

Stealth Tru-Comfort 2

Bas av formgjutet skum med utskuren sittgrop, stor bendelare och lårstöd. Överdel av avlastande trögsaum. Luftigt överdrag.

Tillbehör

Inkontinensöverdrag



Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
Se WebSesam	50-67,5 cm	10 cm	180 kg (bredd 50–52,5 cm) 250 kg (bredd 55–65 cm) 300 kg (bredd 67,5 cm)	Bima Plastteknik	MDR

Bima XXL

Stabil bas med mjukt ytskikt samt viscoskum i sittgrop. Svagt konturerad. Överdrag i stretchig velour. Inkontinenshätta ingår. Kupad undersida. Om plan undersida behövs, kontakta hjälpmedelskonsulent.

Tillbehör

Inkontinensöverdrag



Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
Se WebSesam	54–62,5 cm	10 cm	Obegränsad. Men dynans storlek måste anpassas efter användarens.	Permobil	MDR

Roho Quadto Select

Luftdyna med ISOFLO-ventil som gör att luften kan låsas i fyra kammare för att skapa stabilitet och positioneringsmöjligheter. Luftigt överdrag. Pumpmedföljer.

Tillbehör

Inkontinensöverdrag



Övrigt

Se [Permobil's storleksguide](#)

Rullstolsdynor och tillbehör

TRYCKFÖRDELANDE FÖR BARN

Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
Se WebSesam	25–35 cm	4 cm	60 kg	Care of Sweden	MDR

Curera Contur, barn

Anatomisk formgjuten bas av skum med viscoelastiskt skum på ovansidan. Vätsketätt ytskikt. Överdrag av luftig polyesterplysch. Passar plan- och hängmattesits. Luftigt överdrag.



Tillbehör

Inkontinensöverdrag

Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
Se WebSesam	25–38 cm	5 cm	40 kg (bredd 25 cm) 50 kg (bredd 30 cm) 55 kg (bredd 33 cm) 60 kg (bredd 35 cm)	BimaPlastteknik	MDR

Combi, barn

Anatomiskt formad skumdyna med sidostöd och bendelare. Olika sorters skum med kallskum i sittgroppen. Plan undersida. Överdrag av laminerad plysch.



Tillbehör

Inkontinensöverdrag

Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
Se WebSesam	25–33 cm	5,5 cm	45 kg	Permobil	MDR

Comfort Curve, barn

Bas i formgjuten skum vilket fördelar belastningen och ger stabilitet. Fasadekanter för att passa både plan- och hängmattesits. Luftigt överdrag.



Tillbehör

Inkontinensöverdrag

alla produkter och artikelnummer finns i websesam.

Rullstolsdynor och tillbehör

TRYCKAVLASTANDE FÖR BARN

Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
Se WebSesam	25–34 cm	5 cm	160 kg	Nima Care	MDR

Nima Basic skikt, barn

Kallskum i två skikt, Fasade kanter för att passa både plan- och hängmattesits. Luftigt överdrag.



Tillbehör

Inkontinensöverdrag

Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
Se WebSesam	25–35 cm	5,5 cm	20 kg (bredd 25 cm) 25 kg (bredd 27 cm) 30 kg (bredd 30 cm) 35 kg (bredd 33 cm) 40 kg (bredd 35 cm)	BimaPlastteknik	MDR

Bima formsits, barn

Något formad skumdyna med bendelare. Viskoelastiskt skum i sittgrop. Plan undersida. Dynan kan beställas individuellt anpassad på [BimaPlasttekniks blankett för anpassning](#). Överdrag av plysch med tunn skumgummi på insidan.



Tillbehör

Inkontinensöverdrag

Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
Se WebSesam	28–36,5 cm	5,5 cm	Obegränsad. Men dynans storlek måste anpassas efter användarens.	Permobil	MDR

Roho Quadtro Select låg, barn

Luftdyna med tryckavlastande egenskaper och positioneringsmöjligheter. Pump medföljer.

Tillbehör

Inkontinensöverdrag

Övrigt

Se [Permobil's storleksguide](#)

alla produkter och artikelnummer finns i websesam.

Rullstolsdynor och tillbehör

POSITIONERANDE/TRYCKFÖRDELANDE FÖR BARN

Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	Leverantör	Klassificering
Se WebSesam	28–32 cm	5,5 cm	Obegränsad. Men dynans storlek måste anpassas efter användarens.	Permobil	MDR

Roho Quadtro Select låg, barn

Luftdyna med tryckavlastande egenskaper och positioneringsmöjligheter. Pump medföljer.

Tillbehör

Inkontinensöverdrag

Övrigt

Se [Permobil's storleksguide](#)



Artikelnummer	Bredd	Höjd	Leverantör	Klassificering
Se WebSesam	26–34 cm	5 cm	Etac	MDR

Starlock, barn

Luftdyna med cellåsteknik, dvs. flödet mellan cellerna kan låsas. Luftgenomsläppligt överdrag.

Övrigt inkontinensöverdrag finns som tillbehör.

Se [Etacs storleksguide](#)



alla produkter och artikelnummer finns i websesam.

Rullstolsdynor och tillbehör

TILLBEHÖR

Artikelnummer	Leverantör	Klassificering
Se WebSesam	Salubrious	MDR

Mellanrumshandske

Handske för att kontrollera mellanrummet mellan användaren och dynans botten/stolens sits.



Artikelnummer	Bredd	Höjd	Max. användarvikt	cm	Nima Care
Se WebSesam	30–45 cm	Framkant 1 cm, bakkant 3–8	150 kg	Leverantör	Klassificering

Kildyna, hård

Kildyna i cellpolyeten. Kan användas som positionering/anpassning av befintlig dyna.



Artikelnummer	Bredd	Höjd	Leverantör	Klassificering
Se WebSesam	35–55 cm	2,5 cm	Care of Sweden	MDR

Utjämningsplatta Curera

Används i rullstolar med hängmattesits för att få en jämn sittyta. Används tillsammans med dyna med plan botten utan kompensering för hängmatteeffekt.



Utjämningsplattan finns i två olika modeller:

- Utan antiglid som placeras inuti sittdynsöverdraget under dynan.
- Med svart antiglid på undersidan som kan placeras direkt i rullstolen under sittdynan.

information om alla hjälpmedelsområden hittar du på vår hemsida
www.regionvasterbotten.se/hjalpmedel